

## カビ毒分析前処理用イムノアフィニティーカラム 堀場製作所

- 高い有機溶媒耐性、迅速な前処理を実現
- 複数のマイコトキシンを同時に処理可能
- 要冷蔵、使用期限：8℃において製造後12ヶ月


品名	対象マイコトキシン	入数	P/N	希望小売価格(税抜/円)
AFLAKING (アフラクキング)	アフラトキシン	25	AC01-25	45,000
アフラトキシン分析前処理用イムノアフィニティーカラム	B1、B2、G1、G2、M1	50	AC01-50	80,000
OCHRAKING (オクラキング)	オクラトキシン	25	AC02-25	45,000
オクラトキシン分析前処理用イムノアフィニティーカラム	A、B			

MycoSep<sup>®</sup>、MultiSep<sup>™</sup>、Autoprep<sup>®</sup>、MycoSpin<sup>™</sup>

- 特長** 食品の抽出液を通す操作だけで、夾雑物が取り除けます。  
機器分析 (HPLC, LC/MS) の前処理にご使用ください。  
適用食品：穀物、豆類、種実類等  
適用カビ毒など：アフラトキシン、トリコテセン系カビ毒、残留農薬
- 機構** 固相：分配吸着+陽イオン交換+陰イオン交換  
目的のカビ毒は保持されずに夾雑物のみ保持されるためクリーンアップが可能です。

非イオン性親水性物質 (カビ毒) → 保持されない

## ■形状

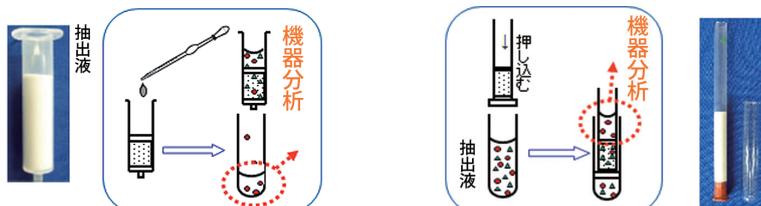

- シリンジ型 自然落下が可能です。  
MultiSep<sup>™</sup>, MF-A1000, MF-T1500
- MycoSep<sup>®</sup>型 ゆっくり押し込みます。  
上部の液を分取します。 MycoSep<sup>®</sup>

- スピン型 カビ毒一斉分析の前処理が可能です。  
MycoSpin<sup>™</sup>



品名	充てん剤	カートリッジ形状	適用	入数	P/N	希望小売価格(税抜/円)
MycoSep <sup>®</sup> #226 AflaZon +	逆相+順相+イオン交換	マイコセップ型	アフラトキシン、ゼアラレノン	25	R905 0226	37,500
MultiSep <sup>™</sup> #226 AflaZon +	逆相+順相+イオン交換	6mL シリンジ型	アフラトキシン、ゼアラレノン	25	R905 9226	40,000
MycoSep <sup>®</sup> #112 AflaZon	226の1/4サイズ	マイコセップ型	アフラトキシン	25	R905 0112	30,000
MycoSep <sup>®</sup> #227 Trich +	活性炭(逆相)+順相+イオン交換	マイコセップ型	トリコテセン系カビ毒(DON、NIV、T-2など)	25	R905 0227	37,500
MultiSep <sup>™</sup> #227 Trich +	活性炭(逆相)+順相+イオン交換	6mL シリンジ型	トリコテセン系カビ毒(DON、NIV、T-2など)	25	R905 9227	40,000
Autoprep <sup>®</sup> MF-T 1500	活性炭(逆相)+順相+イオン交換	6mL シリンジ型	トリコテセン系カビ毒(DON、NIV、T-2など)	25	R908 2000	32,000
MycoSep <sup>®</sup> #228 AflaPat	226の逆相を強化	マイコセップ型	アフラトキシン、パツリン	25	R905 0228	40,000
MultiSep <sup>™</sup> #228 AflaPat	226の逆相を強化	6mL シリンジ型	アフラトキシン、パツリン	25	R905 9228	40,000
Autoprep <sup>®</sup> MF-A 1000	226の逆相を強化	3mL シリンジ型	アフラトキシン	50	R908 1000	48,000
MycoSep <sup>®</sup> #229 Ochra	多機能	マイコセップ型	オクラトキシン	25	R905 0229	40,000
MultiSep <sup>™</sup> #229 Ochra	多機能	6mL シリンジ型	オクラトキシン	25	R905 9229	40,000
MultiSep <sup>™</sup> #211 Fum	多機能	6mL シリンジ型	フモニシン	25	R905 9211	40,000
MycoSep <sup>®</sup> #230 NIV	多機能	マイコセップ型	DON、DON グルコシド	25	R905 0230	40,000
MultiSep <sup>™</sup> #230 NIV	多機能	6mL シリンジ型	DON、DON グルコシド	25	R905 9230	40,000
MycoSpin <sup>™</sup> #400	多機能	1mL スピン型	カビ毒一斉分析	25	R905 0400	26,000

冷蔵所で保管してください。期限：製造より18ヶ月(Autoprep<sup>®</sup>製品は製造より5年程度)