

## 島津 GC/GCMS 用 セプタム


分析目的に合わせて汎用セプタムから高感度分析用ローブリードセプタムまで数種類のセプタムを発売しています。下記の選択ガイドをご参考にお選びください。

ローブリードセプタムもブリーディングがゼロではありません。各種セプタムによってブリーディングの種類は異なり、クロマトグラム上で異なるパターンとして現れます。高感度分析においては、目的化合物のピークを妨害する位置にブリーディングが現れないセプタムを選択し、使用する必要があります。

### ■ 島津標準セプタム

一般的な分析にご使用いただける汎用セプタムです。

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
セプタム、シリコンゴム製	20	201-35584	740
セプタム、シリコンゴム製	200 (20個入×10袋)	201-35584-84	6,100
セプタム、シリコンゴム製	1,000	501-317	23,500

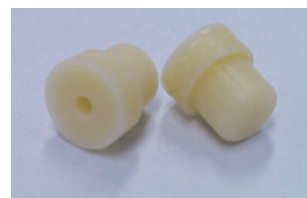

### ■ GLC こまちレッド、プレミアム BTO® セプタム

ローブリード、最高使用温度 400°C。

プラズマコーティング処理の採用により、注入口への付着を大幅に低減します。

コンディショニング済み、センターガイド (穴) 付、プリスターパック採用。

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
GLC こまち (レッド)	25	GLC-KRSh-25	9,500
GLC こまち (レッド)	50	GLC-KRSh-50	15,000
GLC こまち (レッド)	100	GLC-KRSh-100	25,000




### ■ GLC こまちピンク、ロングライフセプタム

ロングライフ (長寿命) セプタムです。

コンディショニング済み、センターガイド (穴) 付、プリスターパック採用。

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
GLC こまち (ピンク)	25	GLC-KPSh-25	11,000
GLC こまち (ピンク)	50	GLC-KPSh-50	17,000
GLC こまち (ピンク)	100	GLC-KPSh-100	28,000

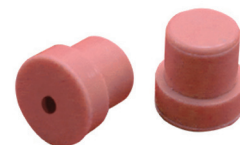

### ■ 島津ブルーセプタム

島津 GC セプタムの中で最も柔軟性が高いセプタムです。

最高使用温度 (INJ 設定温度) 350°C までご使用頂ける、ローブリードタイプセプタムです。


品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
島津ブルーセプタム	50	221-75180	13,300



### ■ LL セプタム (ロングライフ) 青色

ローブリードとロングライフを両立させたセプタムです。セプタムの切り屑がインサートに落ち難く、コスト面でも優れています。最高使用温度 (INJ 設定温度) 450°C 高感度分析用。

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
LL セプタム (ロングライフ)	20	221-48972-91	6,100

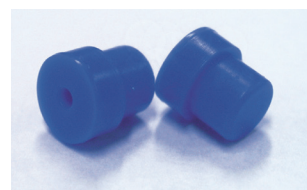

### ■ HT セプタム (ハイテンブ) 茶色

試料気化室を 450°C の高温で連続使用した場合の、耐久性低下を少なくしたセプタムです。LL セプタムに比べ、高温使用時でのブリード増加量が少なく抑えられています。最高使用温度 (INJ 設定温度) 450°C 高温高感度分析用。

品名	入数	P/N	希望小売価格 (税抜/円)
HT セプタム (ハイテンブ)	20	221-48398-91	11,800

