

島津 GLC 取扱い GC メンテナンスツール

GC, GC/MS ユーザー様向けにカラムの取り付け時や装置のメンテナンスの際に大変便利な Restek 社製メンテナンスツールをご紹介します。是非ご活用ください！！



■セラミックカッター

4面とも利用可能な便利なヒューズドシリカキャピラリーカラムカッターです。

PN	入数	価格
20116	5	7,400



■高温用ストリング

このストリングは 400℃まで使用できます。キャピラリーカラムのバンドとして、またカラムをオープン内に取り付ける場合にお使い下さい。

PN	入数	価格
20109	10m	6,200
20618	450m	43,400



■フラッシュライト

ライトヘッドが動き、また焦点調整が可能です。GCオープン内を照らすのに便利です。

PN	入数	価格
22187	1	6,800



■ポケットルーペ

小型で携帯性に優れた拡大鏡です。倍率は X10 で、カラムの切断面などをチェックするのに便利です。

PN	入数	価格
20124	1	4,600



■カラムキャップ

キャピラリーカラムに外気が混入することを防止するため、キャピラリーカラムを保管するのに最適です。青色キャップと無色キャップがセットになっているので、カラムの IN 側と OUT 側を識別するのに非常に便利です。

PN	入数	価格
21044	10組 (無地キャップ 10・青キャップ 10)	10,700



■ミニハンドドリル

セットの中身は、内径 0.25, 0.32 及び 0.53 (外径 0.4, 0.5 および 0.8) のキャピラリーカラム用が各 1 本です。わずかな時間でフェラルを精度良く貫通します。

PN	入数	価格
20122	3本セット	7,200

2010年10月からの価格です。



■ステンレススチールジェットリーマー

検出器ジェットのメンテナンスや、フィッティングに固まったフェラルの除去などに最適なツールです。

PN	入数	価格
20113	6本セット	7,600



■ミニウールプラー


ウールの引抜、充てんを簡単に行うことができます。便利な2本入りです。

PN	入数	価格
20114	2	4,400



■セプタムプラー

セプタムプラーを使用することで装置に手を触れることなく、セプタム・Oリングの交換を簡単に行えます。分析に悪影響を及ぼすセプタムの破片を除去することも可能です。

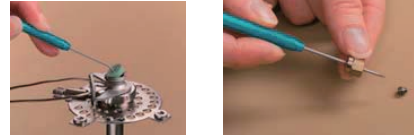


PN	入数	価格
20117	1	4,100

- ①注入口を傷つけることなくセプタムを外すことが可能です。
- ②フィッティング内で固まってしまったフェラルも簡単に除去します。



■注入口取り出しツール (外径6φライナー /Agilent 用)

高温のライナーを注入口から簡単に取り出すことが可能です。注入口温度が下がるまで待つ必要は無く、取り出す際のライナーのワレや欠けを防止します。

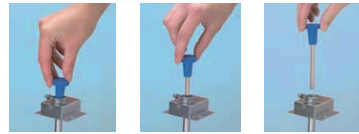

PN	入数	価格
20181	3	7,000






- ①ライナー上端にツールを軽く押し込んでください。
- ②ゆっくりとライナーを注入口から引き抜いてください。
- ③ツールを使用して、新しいライナーを注入口にセッティングします。



■クリップ付カッター

グリップを持ちやすいラバー材質にしたセラミック製カラムカッターです。エッジは片方がノコギリ状に、もう片方がストレートになっています。

PN	入数	価格
23015	2	8,000

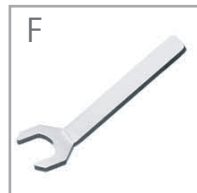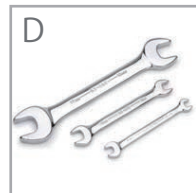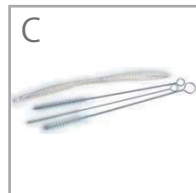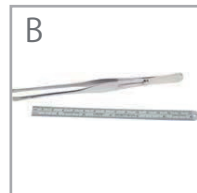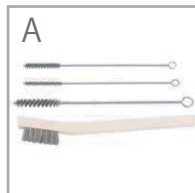

■価格表

PN	商品名	入数	価格
20112	A ステンレススチールブラシ・表面ブラシ	4本セット	6,000
20101	B スライドロックピンセット・15cm コンパクトスチールルーラー	1セット	4,600
20108	C ナイロンスチールブラシ	4本セット	4,100
22997	D レンチセット (6 x 7mm, 8 x 10mm, 16 x 17mm)	3本セット	12,500
22333	E キャピラリーカラム取り付けゲージ	1	17,300
21159	F インジェクターレンチ (島津用)	1	5,100

2010年10月からの価格です。

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F
TEL : 03-5835-0120 FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL : 06-6328-2255 FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店