

## 概要

LabTotal Vial for LCは、島津製作所推奨の品質証明書付きHPLC用ガラスバイアルです。

従来のガラス製バイアルの弱点であった塩基性化合物の吸着を抑制するため、安定した回収率を得ることができます。

また、LCMSを用いて、バイアルからの溶出成分がないことを抜き取り検査で確認しており、品質証明書が付属しています。



品名	LabTotal Vial for LCキット（証明書付き）
部品番号	227-34001-01（透明） / 227-34001-11（褐色）
バイアル材質	透明ガラス / 褐色ガラス（記入用パッチ付き）
バイアル外寸	12 mm
バイアル口径	9.0 mm
キャップ素材 / 色	ポリプロピレン / 黒
セプタム素材	PTFE / シリコン



## 特長

### ガラスバイアル表面への塩基性化合物の吸着低減

ガラス製バイアルの弱点であった塩基性物質の吸着を極力抑えました。

LabTotal Vialは、ガラスバイアル表面への吸着を抑制し、経時変化することなく安定した回収率を得ることができます。

LabTotal Vialは塩基性化合物でも高い回収率を得ることができます。LabTotal Vialの吸着抑制性能はほぼ劣化しません。

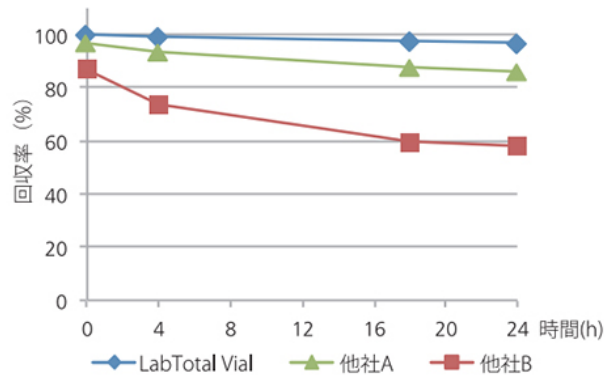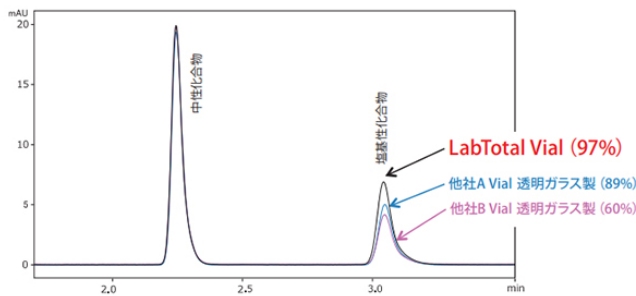

### 高品質バイアルであることを示す品質証明書付き

LCMSおよびGCMSを用いて、バイアルからの溶出成分がないことを抜き取り検査で確認しています。

バイアル由来のゴーストピークを心配することなく、安心してご使用いただけます。



## 広口バイアル、キャップとセプタムのプリセットなど使い勝手が向上

100 $\mu$ Lスケールのマイクロピペッターチップを斜めに挿入することで、バイアル内部底面の角にまで達することができ、試料挿入時やサンプルを取り出す時に使いやすい設計となっています。

また、バイアルにはマーキングラベルが付いていますのでメモ書きにも便利です。



## 価格表

## 島津 LabTotal Vial for LC

- ・ラベル：有り
- ・キャップ色：黒

※キャップのみはP/N:227-34001-02（黒色キャップ、silicone/PTFE、100個入）をお求めください。

P/N	Item Name	ガラス色・材質	容量	入数	価格表
227-34001-01	LC, LC/MS用LabTotal Vial キット、 証明書付き	透明ガラス	1.5mL	100	¥13,400
227-34001-11	LC, LC/MS用LabTotal Vial キット、 証明書付き	褐色ガラス	1.5mL	100	¥14,000